


ЧИПИРАНЕ НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ



дирекция "Здравеопазване на животните"
Национална ветеринарно-медицинска служба
тел. +359 2 915 98 42,
e-mail: p_kam@nvms.government.bg

Конна база "Хан Аспарух", 02.02.2010г

*Подгответе чина и
четящо устройство*

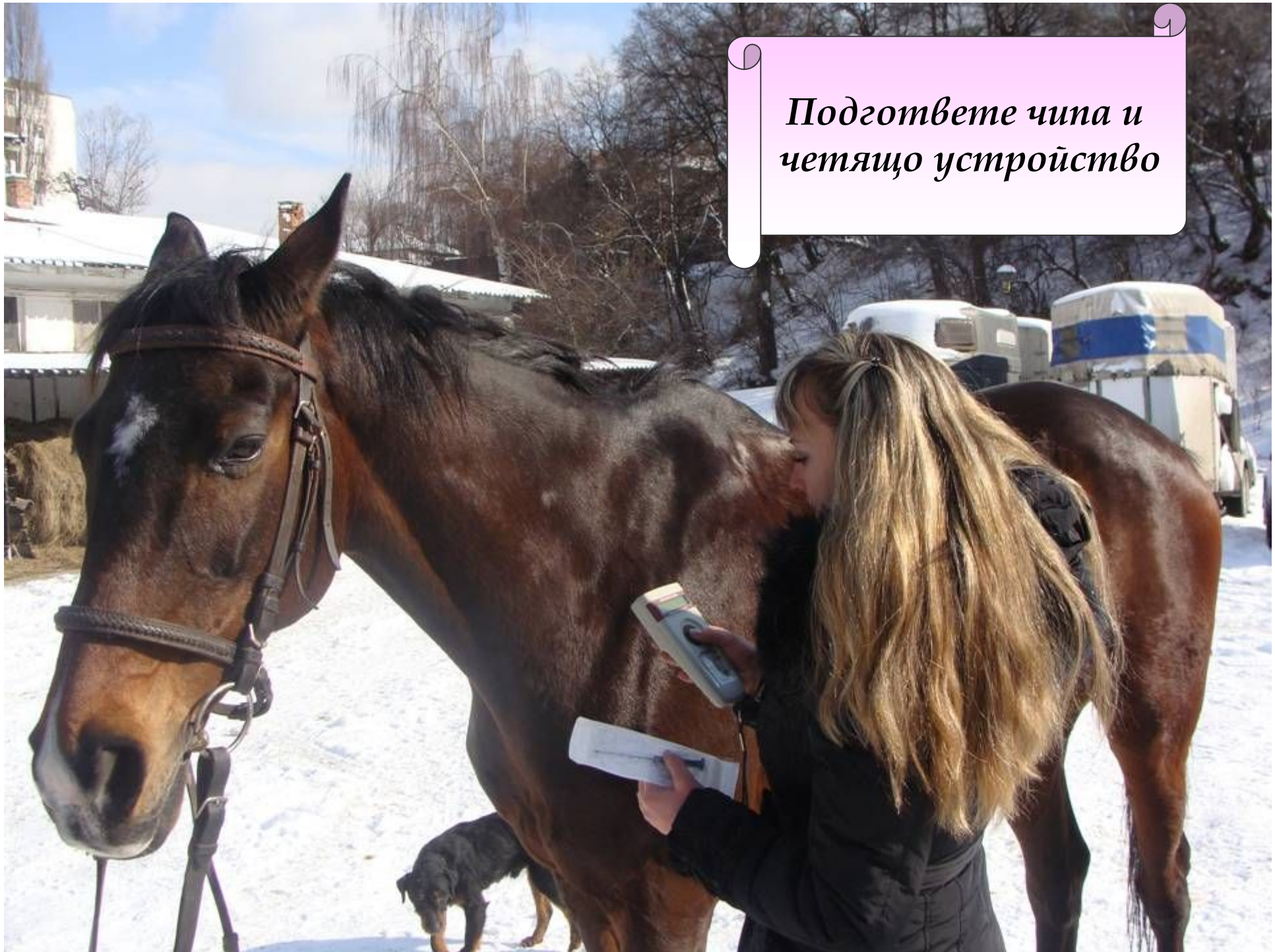




Необходимо е да се
удостовери, че
животното не е
вече чипирано.

**Извършете проверка с
четящо устройство!**




*Проверете
дали чипът
не е дефектен!*



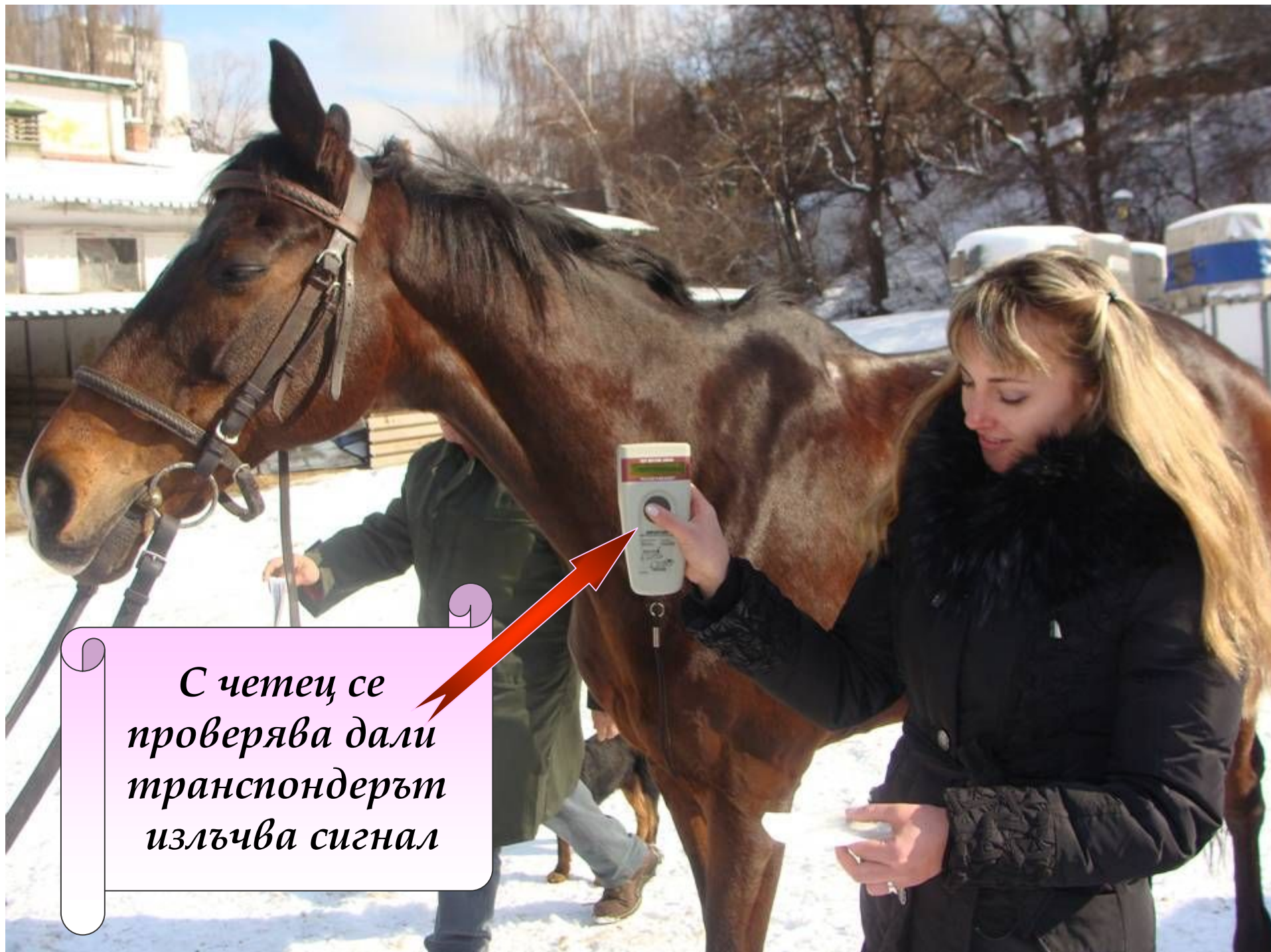

*С четец се
проверява дали
транспондерът
излъчва сигнал*

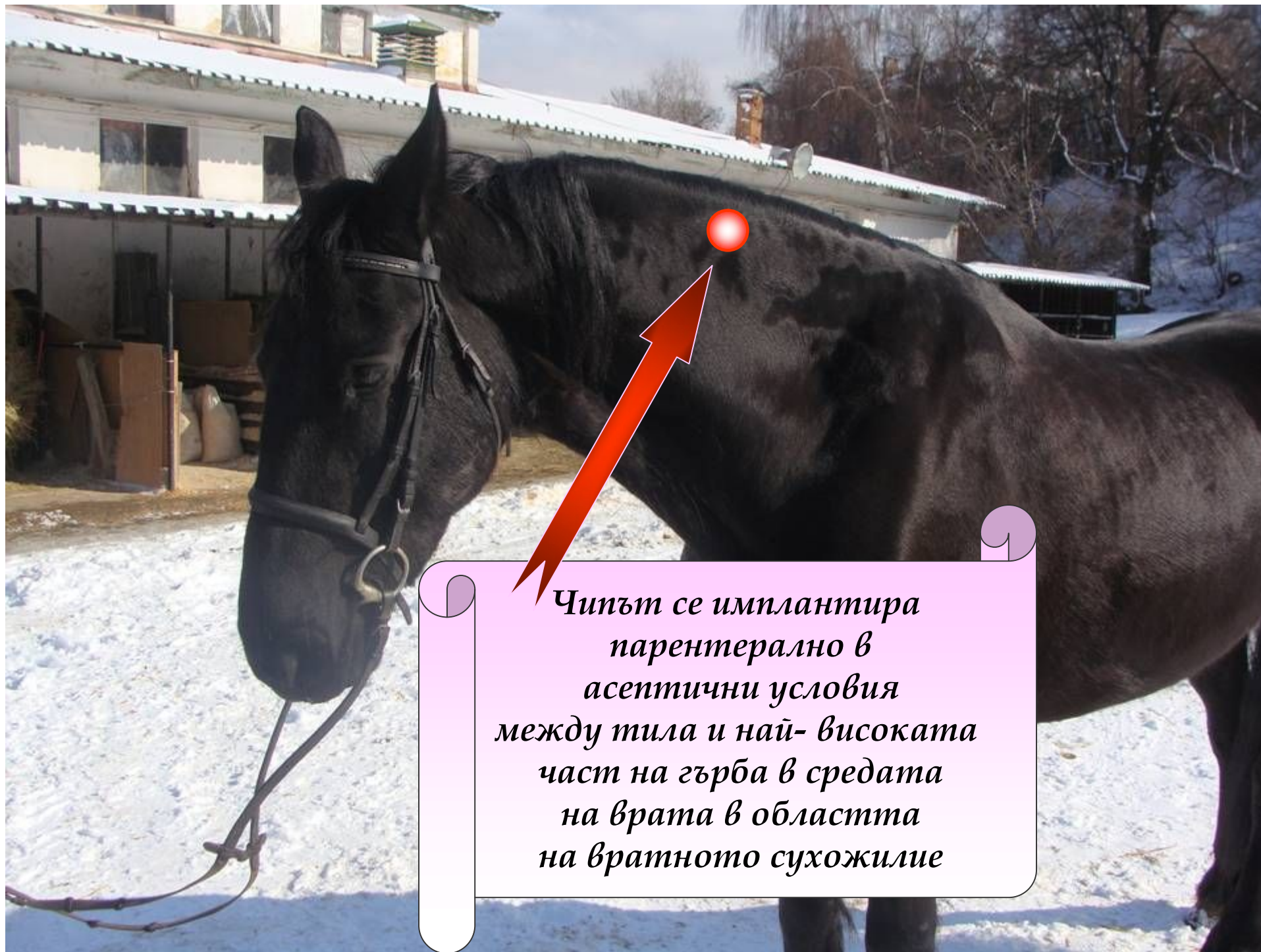

*Чипът се имплантира
парентерално в
асептични условия
между тила и най- високата
част на гърба в средата
на врата в областта
на вратното сухожилие*

*Мястото на поставяне
трябва да бъде обработено
с дезинфектант*



1

*Чипът се поставя
дълбоко парентерално
перпендикулярно на
врата на животното*



1

Чрез палпация
се проверява дали
чипа не е попаднал
подкожно





*След аплицирането,
транспондерът
отново трябва да се
прочете с четящото
устройство*

*Веднъж инжектиран,
чипът остава на
мястото на инжектиране
през целия живот
на животното*



*Съгласно Регламент 504/2008/ЕО всички
еднокопитните животни:*

- *коне*
- *магарета*
- *мулета*
- *катъри*
- *зебри*
- *и д.р*

*трябва да бъдат идентифицирани с паспорт,
като връзката между паспорта и животното се
осъществява от инжектируемия транспондер
/чип/*